

Farbiger Infusionsständer

Verkehrsrot (RAL 3020) beschichtet


I-N71121

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich	Kinderstation, Normalstation
Material	Stahl beschichtet
Farbe der Kunststoffteile	Schwarz
Infusionshalterung	Kunststoff
Anzahl der Haken	4
Anordnung der Haken	90° zueinander
Art der Höhenverstellung	Schraubhöhenverstellung
Minimale Länge/Höhe	1.270 mm
Innenrohrdurchmesser	Ø 18 mm
Außenrohrdurchmesser	Ø 25 mm
Länge Außenrohr	1.000 mm
Auslegerprofil	25 x 25 mm
Fußbeschwerung	Unbeschwert
Fußgröße	Ø 635 mm
Rollentyp	Doppelaufrollen
Rollendurchmesser	Ø 50 mm
Anzahl der Rollen	5, davon 2 mit Feststeller und elekt. Leitfähigkeit
Sterilisierbares Abtropfglas	Ja
Gesamtzuladung (kg)	9.5
Zuladung pro Aufhängung (kg)	8
Zuladung pro Haken (kg)	2

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,20 m
Höhe Box1	0,10 m
Länge Box1	1,22 m
Gewicht Box1	4,00 kg

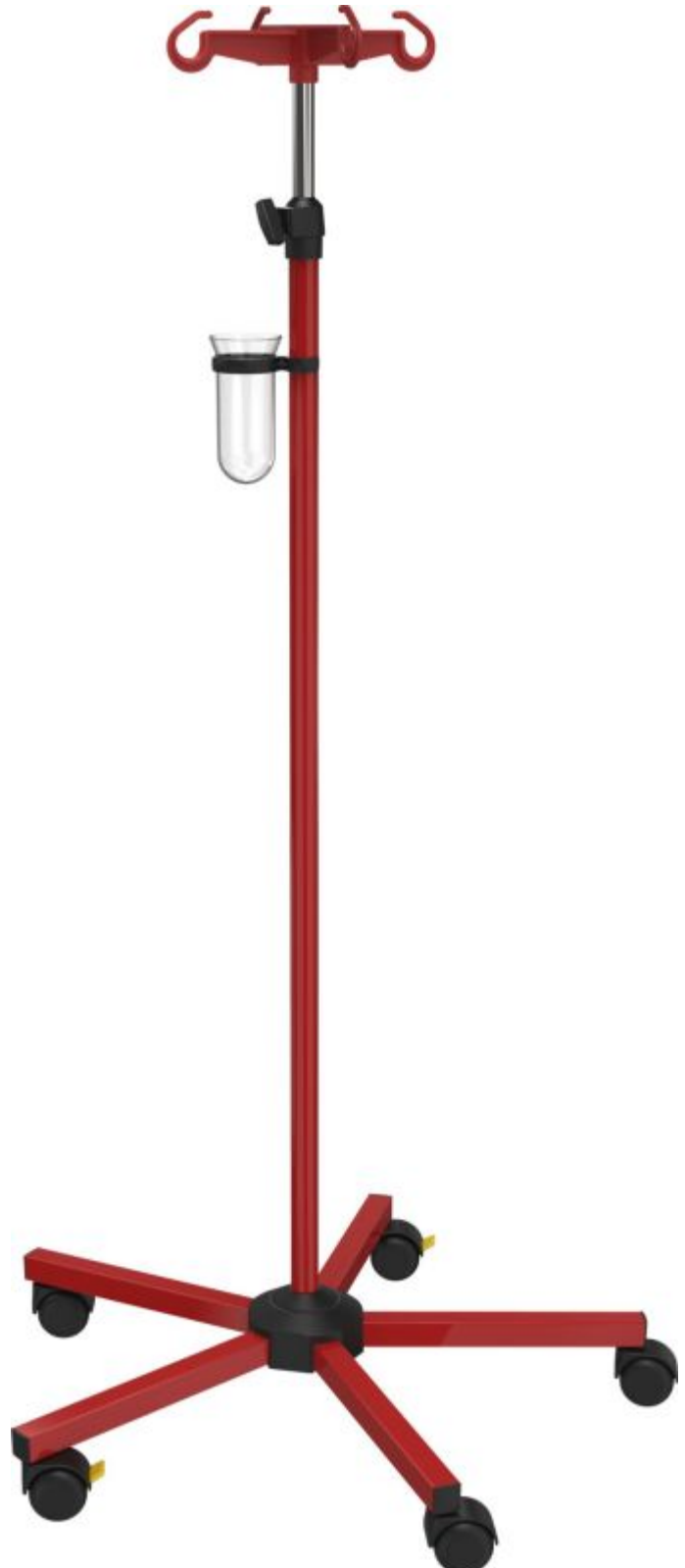

Farbiger Infusionsständer



Anwendung

optimale
Hygieneigenschaften
(Wischdesinfektion)

sehr einfache und schnelle
Montage durch Stecksystem
mit nur 1 Schraube

komfortable Höhenverstellung
mittels
Schraubhöhenverstellung mit
integriertem,
oberflächenschonendem
Formklemmelement



Technik

Alle Kunststoffteile sind
lichtecht

Rollen mit spurloser Lauffläche

Die integrierte
Auszugsbegrenzung verhindert
das Trennen der verstellbaren
Rohre

Sicherheitsflaschenkreuz nach
DIN ISO 15375

glanz- und UV-beständige
Rohr-Oberfläche
(Doppelnickel/ Chrom-Schicht -
Schichtdicke ca. 20 µm)

sehr hoher Korrosionsschutz
durch 3-Schicht-Verfahren

hervorragende
Salzsprühnebeltest-
Beständigkeit

das Eintreten von hygienisch



Ökonomie

Kompakte Verpackung führt
zur kostengünstigen
Versendung



Sicherheit

Die Ausleger sind mit Stopfen
aus Kunststoff verschlossen
(keine Verletzungsgefahr)

Geringe Klemmgefahr beim
Ein- und Ausfahren des
Statives dank eingebautem
Sicherheitsabstand

Keine Verletzungsgefahr durch
abgerundete Form der
Flaschenhaken

Die Geometrie der Haken
verhindert das Herausfallen
der Infusionsflasche

